



WKM

Brodowicza 11/2, 31-518 Kraków

Tel. +48 12 378 32 77 fax. +48 12 376 46 31

E-mail: bok@wkm-medical.com.pl

www.wkm-medical.com.pl

Analizator hematologiczny



5 DIFF





**Retiku-
locyty**

**NRBC%
NRBC#**



**LIC%
LIC#**

**ALY%
ALY#**

- ➔ Laserowa wielowymiarowa klasyfikacja komórek
- ➔ Pomiar impedancyjny (WIC) i optyczny (WOC) dla WBC
- ➔ Cztery odczynniki
- ➔ Dwa histogramy dla RBC i PLT
- ➔ Skategamy eozynofili i neutrofilii
- ➔ 2 trójwymiarowe obrazy stereograficzne
- ➔ Wykorzystuje laser półprzewodnikowy do systemu cytometrii przepływowej.
- ➔ Zapewnia pełną analizę, w tym rozmiar komórki, ziarnistość i złożoność.
- ➔ Zlicza limfocyty, monocyty, neutrofile, eozynofile i bazofile w kanale WOC

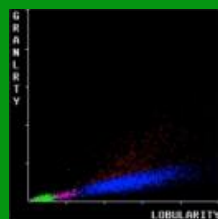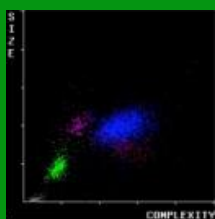

- ➔ Schematy WK56AL dostarczają nie tylko rozproszone gramy, ale także stereogramy 3D, dzięki czemu zróżnicowanie WBC będzie prezentowane na różnych widokach

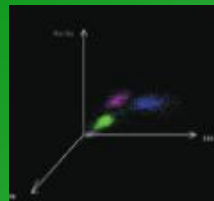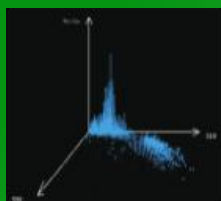

- ➔ Krew kontrolna na III poziomach
- ➔ Prezentacja kontroli w postaci: L-J, X, X-R, X-B



Specyfikacja:

34 parametry:

WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%,
LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC,
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV,
RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR,
P_LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF

Parametry dodatkowe: ALY #, ALY%, LIC #, LIC%,
NRBC #, NRBC%

WBC/DIFF: cytometria przepływowa

Wielowymiarowe laserowe sortowanie komórek

Analiza WBC: metoda optyczna i impedancji

Analiza RBC/PLT: metoda impedancji

Test HGB: bezcyjankowa kolorymetria odczynnikowa

Przechowywanie danych do 200 000 wyników
wraz z grafami

Wspiera analizę RET i IRF, dostarczając więcej
danych do diagnostyki klinicznej

Obsługuje zarówno próbki krwi pełnej, jak i kapi-
larnej

Tryby pobierania próbek: krew pełna 20 µL

Wyświetlacz: 17-calowy kolorowy wyświetlacz
TFT na PC

Wymiary: 660 MM(D) x 565 (Sz) x 545(W)

Waga: 73 kg



WKM
Brodowicza 11/2, 31-518 Kraków
Tel. +48 12 378 32 77 fax. +48 12 376 46 31
E-mail: bok@wkm-medical.com.pl
www.wkm-medical.com.pl