



WKM

Brodowicza 11/2, 31-518 Kraków



Tel. +48 12 378 32 77 fax. +48 12 376 46 31

E-mail: bok@wkm-medical.com.pl

www.wkm-medical.com.pl

ST-200 CC

Analizator równowagi kwasowo-zasadowej

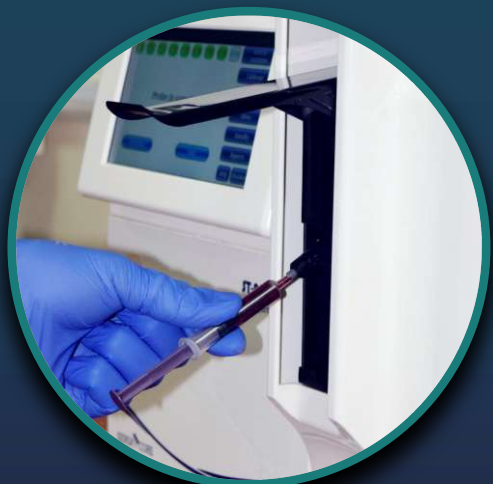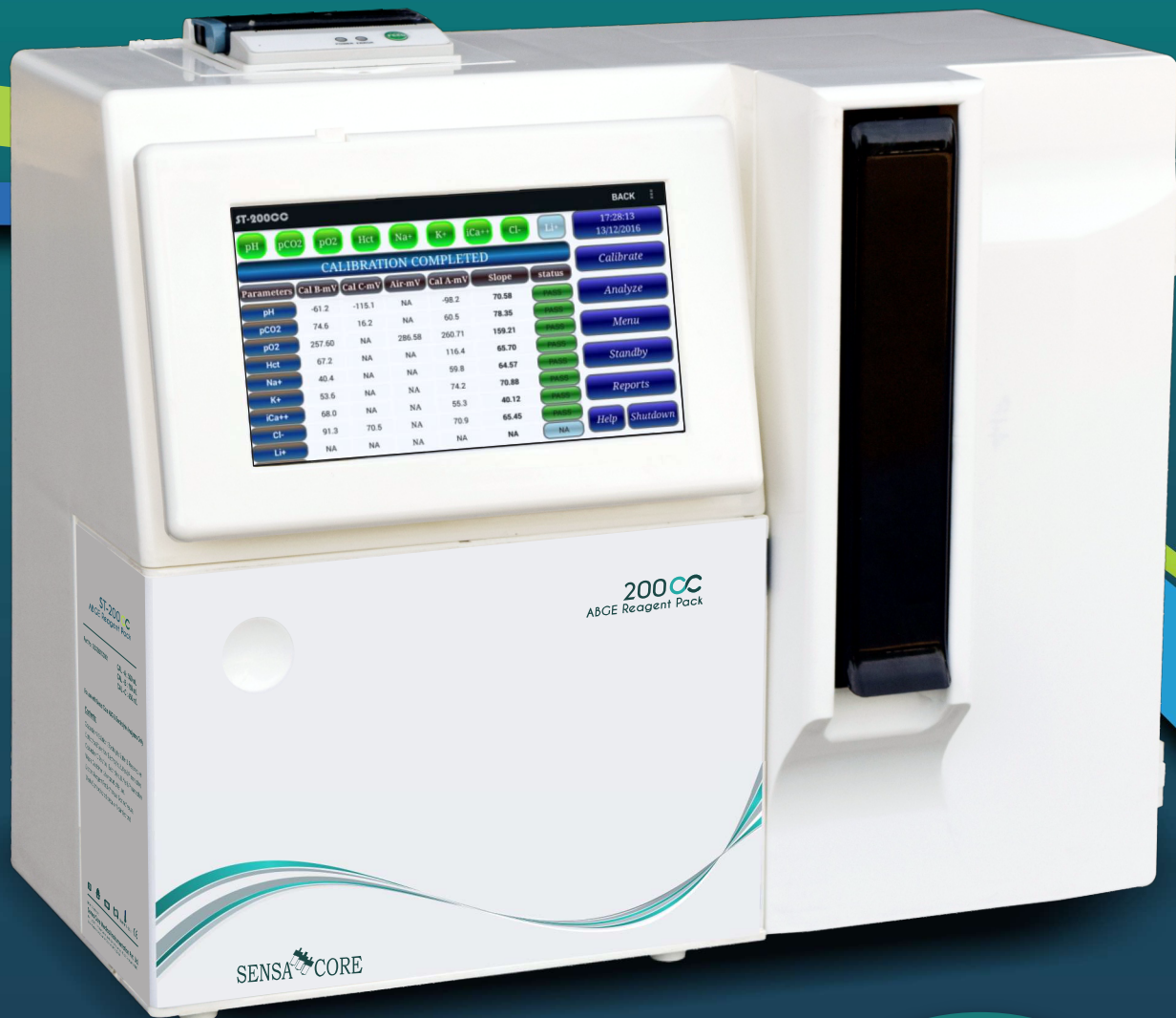

Funkcje

- Pobranie jednej próbki pozwala uzyskać 20 różnych parametrów.
Gazometria krwi : pH, pCO₂, pO₂, Hct.
Elektrolity : Na, K, iCa, Li, pH, Cl.
Parametry wyliczalne: Hb, HCO₃, BE, BE-B, BE-ECF, TCO₂, AG, AG(K), O₂ Sat, O₂ Ct, SBC.
- Obsługa wielu języków.
- Wykres Levey-Jennings'a.
- Zintegrowany z LIS.
- Doskonała precyzja i niezawodność.
- Zintegrowana funkcja konwersji parametrów.
- Jeden zestaw odczynników.
- Opcja wprowadzania numerycznego i alfanumerycznego z 15-cyfrowym identyfikatorem operatora i pacjenta.
- Zewnętrzna opcja czytnika kodów kreskowych, myszy i klawiatury.
- Kalibracja nowego zestawu odczynników za pomocą jednego przycisku.
- 3 różne tryby aspiracji (próbówka, strzykawka i kapilara).
- Maksymalna pojemność przechowywania danych o wynikach 200 000+.
- Wynik może być wyszukany według daty, identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta.
- Niezwykle niski koszt za test.

ST-200

Specyfikacja

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Zasada działania | Bezpośredni pomiar za pomocą elektrody jonoselektywnej (ISE), Impedancji (Hct) i Amperometrii (pO ₂) |
| 2. Rodzaj próbki | Krew pełna, surowica, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy i rozcieńczony moc. |
| 3. Objętość próbki | 140µL. |
| 4. Czas odczytu | 65 sekund. |
| 5. Szybkość | 55 próbek/godzinę. |
| 6. Pojemność | 200 000 |
| 7. Warunki pracy | Temperatura: 5°C - 35°C, wilgotność <85% |
| 8. Wyświetlacz | 7-calowy wyświetlacz LCD z pojemnościowym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. |
| 9. Wydruk | 2 calowa 24 kolumnowa drukarka termiczna |
| 10. Wymiary | 32cm wys x 39cm dł x 19cm gł |
| 11. Waga | 8kg |

ABGE	ABG	ELECTROLYTE											
BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD
pO ₂ Hct	pO ₂ Hct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
K	B	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Na	B	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
iCa	B	B	iCa	iCa	iCa	iCa	iCa	iCa	iCa	iCa	iCa	B	B
pH	pH	pH	pH	Li	Li	pH	Li	pH	Li	B	B	B	B
pCO ₂	pCO ₂	HCO ₃	HCO ₃	pH	B	pH	B	B	B	B	B	B	B
Cl	Cl	Cl	Cl	Cl	Cl	B	B	B	B	Cl	B	Cl	B
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭



WKM
Brodowicza 11/2, 31-518 Kraków
Tel. +48 12 378 32 77 fax. +48 12 376 46 31
E-mail: bok@wkm-medical.com.pl
www.wkm-medical.com.pl